


Benötigte Informationen für eine Beurteilung der Lage beim Kunden vor Ort – vor Transport und Montage Service:

1. Vollständige Lieferadresse (PLZ, Ort, Straße, Gebäude, Stockwerk, Raum/Labor) mit
2. Kontaktperson (Name, Telefonnummer, Email)
3. Ist ein betonierter Anfahrtsweg bis zum Gebäude vorhanden?
4. Kann vor dem Gebäude mit einem Transporter geparkt werden?
5. Steht ein Gabelstapler zur Verfügung?
6. Ist das Gebäude ebenerdig zu betreten oder müssen Stufen/Treppen überwunden werden?
7. Ist die Eingangstür kleiner/schmäler als eine Standardtüre?
8. Falls der Aufbauort nicht ebenerdig liegt: Ist ein adäquater Aufzug vorhanden? Wenn ja, welche Größe (B x T x H) hat der Aufzug ohne evtl. Schutzblecher oder Haltegriffe? Welches Maximalgewicht trägt der Aufzug?
9. Gibt es unverrückbare Hindernisse auf dem Weg zum Raum/Labor (z.B. im Gang), welche die Einbringung erschweren?
10. Ist die Türe zum Raum/Labor kleiner/schmäler als eine Standardtüre?
11. Einfache Situationskizze des Raums/Labors mit vorhandener Möblierung inkl. angedachtem Platzhalter für den/die neuen optischen Tische. Bitte um Maßangabe vorhandener Stell- und Manövrierabstand zur Wand/vorhandenen Möbeln/Pfeilern/Durchgang etc. – siehe nachfolgende Beispielskizze:

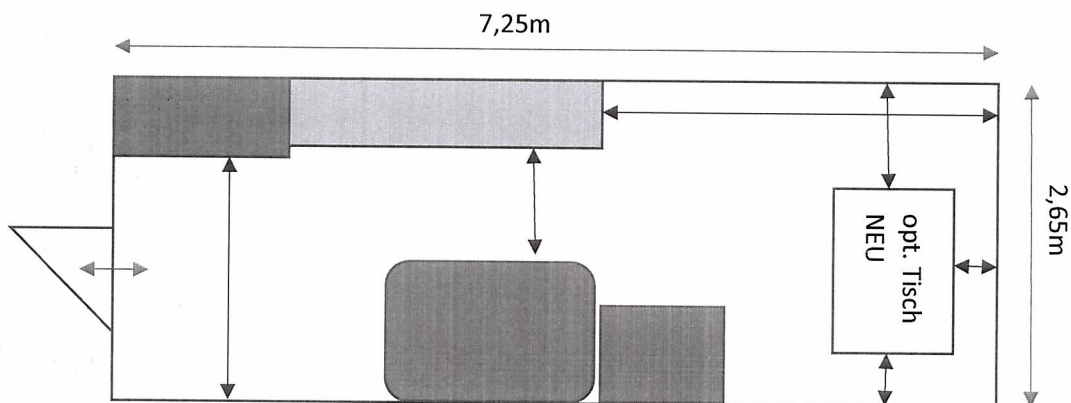

Hilfreich zur realistischen Einschätzung sind auch Bilder!

12. Handelt es sich um einen festen Raumboden oder einen Doppelboden (Statik Bodenbelastung per/qm, Anpassung Arbeitshöhe Tisch)
13. Sind die entsprechenden Anschlüsse (Druckluft) für den Betrieb von z.B. einem DMT Unterbau vorhanden?
14. Müssen für die Einbringung des Tisches bauliche Veränderungen vorgenommen werden?